

DONNÉES TECHNIQUES

Laser		Nd:YAG Pulsé	Alexandrite Pulsé	Nd:YAG + Alexandrite Pulsés
Longueur d'onde (nm)		1064	755	1064 + 755
Temps de pulse (ms)		0.3 ÷ 300*	0.3 ÷ 300*	0.3 ÷ 300*
Mode Rafale		Jusqu'à 3 pulses T on et T off ajustables	Jusqu'à 3 pulses T on et T off ajustables	Jusqu'à 3 pulses T on et T off ajustables seulement lors de l'émission simultanée
Émission		Pièce à main Fibre optique		
Diamètre de spot (mm)		2 ÷ 16	6 ÷ 16	2 ÷ 18
Fluence Max (J/cm ²)		500 (limitée par software)	500 (limitée par software)	500 Alex + 500 Yag (limitée par software)
Fréquence (Hz)		Jusqu'à 10	Jusqu'à 10	Jusqu'à 5
Refroidissement de la peau		Par contact (option) ou avec un adaptateur par air (option)		
Données électriques		3.7 kVA, 200-240 Vac; 50/60 Hz		
Dimensions et poids		530(W) x 1043 (D) x 1060 (H) mm ³ ; 150 Kg		
Notes		* le temps d'impulsion peut changer en fonction de la fréquence et du mode mix choisi		

Le nom certifié du Modèle est: Duetto MT

OPTIONS	Twain 2940	Twain IPL					
Source	Er:YAG	Pièces à main IPL					
Longueur d'onde (nm)	2940	650-1200	625-1200	590-1200	570-1200	550-1200	400-1200
Temps de pulse (ms)	0.3÷1	5 - 240					
Fréquence (Hz)	Jusqu'à 6	0,5					
Diamètre de spot (mm)	2, 4, 9 mm + fractionné	48x13 or 25x13 mm ²					
Fluence (J/cm ²)	jusqu'à 95 @ 2 mm	jusqu'à 25					



**DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
EN FRANCE**

The Code of Excellence

4 rue Paul Massimi – 69007 Lyon – France

Tel: 04 78 62 71 48 – Fax: 04 78 62 66 37

info@deka.fr – www.dekalaser.com

S.A.R.L au capital de 155668€ - RCS Lyon– Siret 409 548 666

00042 Code NAF 4774Z - Ne pas jeter sur la voie publique

**RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE
ÉVITER L'EXPOSITION DE LA PEAU ET DES YEUX AU RAYONNEMENT DIRECT OU INDIRECT
PRODUIT LASER: CLASSE 4
POUTRE D'ORIENTATION: CLASSE 3R**



*Note: Les autorités locales peuvent restreindre les paramètres indiqués dans le tableau ci-dessus ou limiter ou supprimer certaines utilisations prévues.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis*

Quanta System produit selon les standards internationaux de qualité et nos lasers sont conformes à la plupart des certifications internationales. La société est certifiée EN ISO 9001:2008 et EN ISO 13485:2012. Quanta System S.p.A a été fondée en 1985 et appartient au Groupe EI. En. (groupe coté au Star segment de la bourse italienne) depuis Janvier 2004. La société possède trois divisions (médicale, scientifique et industrielle) et est spécialisée dans la production de lasers et de systèmes opto-électroniques.



Quanta System S.p.A
quanta@quantasystem.com
www.quantasystem.com



Taking care of people, our masterpieces

Duetto MT EVO


Plateforme
Alexandrite et Nd:YAG Combinés avec Mixed Technology



DUETTO MT EVO

NOUVELLE TECHNOLOGIE “SANS COMPROMIS”

Duetto MT EVO propose deux longueurs d'onde (755 nm et 1064 nm) en une seule émission avec des fluences, des durées d'émission réglables permettant ainsi d'améliorer la sécurité et l'efficacité des traitements.

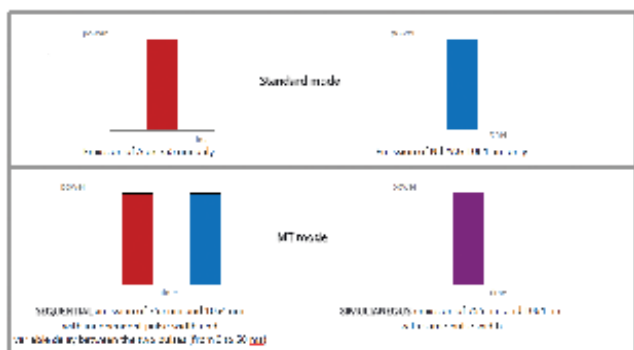

Duetto MT EVO offre de nombreuses possibilités pour l'épilation, les traitements vasculaires et la photo-réjuvenation. Grâce à la Mixed Technology, **Duetto MT EVO** vous permettra d'effectuer vos traitements soit avec une seule longueur d'onde soit avec les deux, de manière simultanée ou en mode séquentiel selon le patient que vous aurez à traiter.

Duetto MT EVO est la meilleure solution pour les professionnels de l'esthétique car il permet de proposer des traitements “sur mesure” efficaces et en toute sécurité. Il est proposé avec une gamme complète de pièces à main jusqu'à 16 mm.

ACCESSOIRES & OPTIONS

TWAIN 2940

Twain 2940 est un pistolet laser qui peut être monté sur la plateforme **Duetto MT EVO**. Il permet des traitements ablatifs, fractionnés ou non. La longueur d'onde Er:YAG laser @ 2940 nm est utilisée pour permettre une vaporisation superficielle de l'épiderme permettant d'obtenir d'excellents résultats sur les rides et ridules ainsi que sur les tâches pigmentaires bénignes.



FRACTIONNÉ
Utilisé pour les cicatrices d'acné, les tâches pigmentaires bénignes et lentigos solaires.

HOMOGENÈNE
Resurfacing classique, rides et ridules.

TWAIN IPL

Duetto MT EVO peut être également équipé avec la pièce à main Twain IPL.



Possibilité de 6 longueurs d'onde différentes avec refroidissement par contact, pour les épilations, les lésions pigmentaires, le vasculaire diffus et l'acné actif.

SKIN COOLER de contact

Système de refroidissement par peltier **SKIN COOLER**. Ce système offre une protection thermique ainsi qu'un confort lors des traitements.




SKINCRYO

Il s'agit d'une pièce à main qui permet l'adaptation au système de refroidissement par air Zimmer. Il est recommandé pour apporter un confort optimal lors de traitements des grandes surfaces.



RÉSULTATS
AVANT / APRÈS

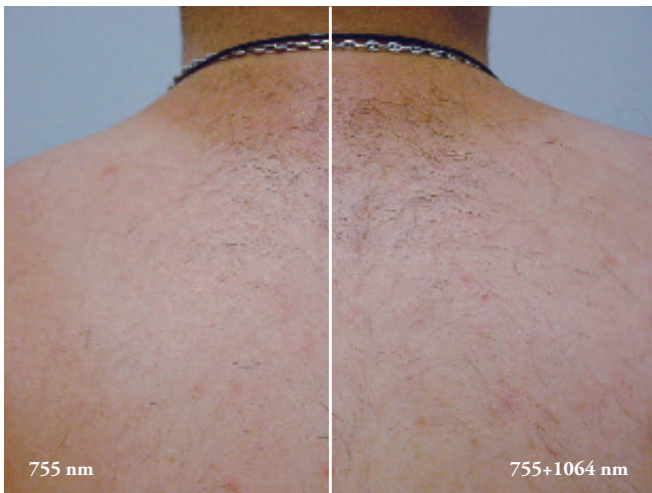

755 nm

755+1064 nm

ÉPILATION
755 nm - 755+1064 nm
Aimable autorisation de Paolo Sbano MD



755 nm

755+1064 nm

ÉPILATION
755 nm - 755+1064 nm - Après 2 traitements, Suivi à 4 mois
Aimable autorisation de Paolo Sbano MD



PHOTO-RÉJUVENATION
Aimable autorisation de Dhami MD



ÉPILATION
Aimable autorisation de Paolo Sbano MD



VASCULAIRE
Aimable autorisation de Emilio Bonizzoni MD



ANGIOME STELLAIRE
Aimable autorisation de Emilio Bonizzoni MD